

ゆったりサイズで安定感抜群

- 赤ちゃんも安心のゆったりサイズの乳児皿。
- がたつかず安定感のある設計。
- 赤ちゃんを降ろしてからも測定値を表示。
- 高精度2g単位の測定が可能。
*0~6kgまで2g単位、6~15kgまで5g単位で測定。
- 授乳量が確認できる専用キー付き。
- 体重の証明用に使用可能。

バックライト付きで暗い場所でもよく見える



*バックライトは AC アダプター使用時のみ点灯します。




仕様

品番	BD-815 高精度ベビースケール	
型式承認番号	第D1921号 精度等級3級	
はかり仕様	複目量はかり(自動切替)	
計量方式	電気抵抗線式はかり	
ひょう量(最大計量)	6kg	15kg
目量(最小表示)	2g	5g
最小測定量	40g	100g
最大風袋引き量	2kg	
拡張目量(体重証明外)	1g	
機能	体重表示 測定値メモリー メモリー値呼出 授乳量表示 表示固定 拡張表示(1g) バックライト	
設定項目	表示固定(時間設定※1 10秒/20秒/30秒/なし から選択) ※1 赤ちゃんを降ろした後に測定値を表示し続ける時間 オートパワーオフ(時間設定 15分/30分/45分/60分/連続から選択) 外部出力(プリンター出力/RS-232C出力から選択)	
表示方法	LCD 文字高 約23.4mm バックライト点灯※2(オレンジ) ※2 ACアダプター使用時のみ	
外部インターフェイス	RS-232C(Dサブ9ピン メスコネクター 出力専用)	
商品寸法(質量)	本体	約 幅600×高さ157×奥行404mm(約4.6kg/乾電池含まず)
	乳児皿	約 幅600×奥行350mm
主な材質	本体・皿: ABS、ソフトマット: EVA	
電源	専用ACアダプター DC6V単3形乾電池4本	
定格電圧	DC9V(ACアダプター使用時)/DC6V(乾電池使用時)	
消費電流	50mA(ACアダプター使用時)/40mA(乾電池使用時)	
消費電力	0.5W以下(ACアダプター使用時)/0.3W以下(乾電池使用時)	
主な付属品	ACアダプター 単3形乾電池4本 ソフトマット1枚 身長計シール(55cm)	
製造国	日本	
価格	¥98,000(税抜)	

寸法図 (単位:mm)

質量:約4.6kg

ACアダプターケーブル長さ:約1.8m

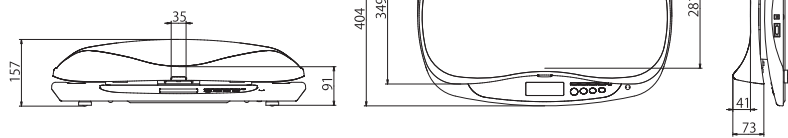

※寸法は概略です。

オプション

BD-815専用ソフトマット(3枚セット)
BD-815-OM
¥10,800(税抜)

健診時などの衛生管理にはソフトマット
の交換をおすすめします。
洗浄可能で繰り返し使えます。



感熱式プリンターセット OP-201
¥84,000(税抜)
(プリンター、ACアダプター、RSケーブル、
プリンター用紙(2903)4巻)

プリントアウト例

秤重	3972 g	授乳量	104 g	メモリー秤重	3968 g
		メモリー授乳量	3968 g		



株式会社 **タニタ**

本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335
大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778
名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市中区東区牧の原2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221
福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617
北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163

(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187(66)2122(代表)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) ☎0570-099655 受付時間9:00~18:00(祝日を除く月~金)

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2020年5月現在のものです。
◎商品のデザイン・仕様・価格に変更になることもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

<https://www.tanita.co.jp/>

©2020 TANITA Corporation.

安心のゆったりサイズ

バックライト付きで、
暗い場所でもよく見える

メモリボタン 授乳量ボタン 呼出ボタン 表示固定解除ボタン

測定値をメモリーする時に使用します。 授乳前の値をメモリーすることで授乳量がわかります。 メモリーされている測定値を見たいときに使用します。 表示固定を解除するときに使用します。

ON/風袋ボタン ゼロボタン OFFボタン 拡張表示ボタン

電源を入れるときまたは、風袋引き測定をするときに使用します。 ゼロリセットするときに使用します。 電源を切るときに使用します。 1g単位で表示を見たいときに使用します(体重証明外)。



移動に便利な
取っ手付き

ソフトマットやバスケット(乳児皿)は
取り外して洗えます。